




Características de Cochlear Wireless TV Streamer

- Disfrute del streaming de audio de alta calidad procedente de la televisión, un equipo estéreo, un ordenador o dispositivos similares en su procesador de sonido de la serie CP900.
- Admite tanto entradas analógicas como digitales.
- Se vuelve a conectar automáticamente si sale de la habitación y vuelve en 5 minutos.
- Instálelo y olvídense: con solo pulsar un botón podrá ver la televisión.

El TV Streamer se enchufa en una toma de corriente de pared ordinaria y se conecta directamente con el dispositivo de audio. El TV Streamer obtendrá sonido estéreo mediante streaming a través del procesador de sonido desde hasta 7 metros de distancia.

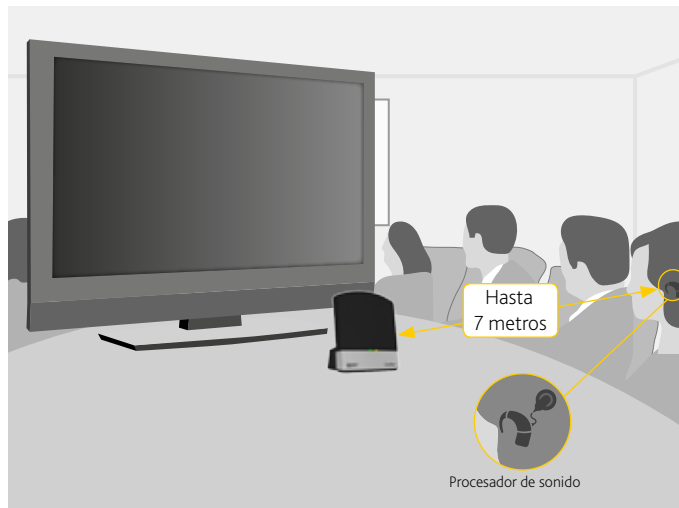

Vista general del producto



Primeros pasos

Ajuste del volumen

Cómo:

Para cambiar el volumen, utilice los controles de volumen de TV Streamer.

Asegúrese de que los procesadores de sonido están cómodamente ajustados antes de cambiar los ajustes con el control de volumen. En la mayoría de los casos, sólo tiene que llevar a cabo este ajuste una vez, ya que TV Streamer guarda el nivel de volumen establecido más recientemente.

Control mono/estéreo

Cómo:

El interruptor de dos posiciones mono/estéreo se puede utilizar para establecer el streaming de audio como mono o estéreo.

En el caso de dispositivos bilaterales, se recomienda ajustar el interruptor en estéreo.

Si el dispositivo es unilateral, se debe ajustar mono.




Enlace con el procesador de sonido de la serie CP900


- A** Enchufe el TV Streamer en la pared con el cable de alimentación y la toma micro-USB de TV Streamer.



- B** Conecte el cable de audio en la toma mini-jack de entrada de audio del TV Streamer y conéctelo a la fuente de audio.

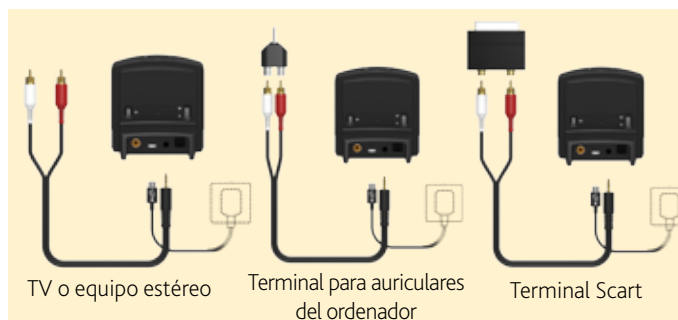


- C** Apague el procesador de sonido de la serie CP900.

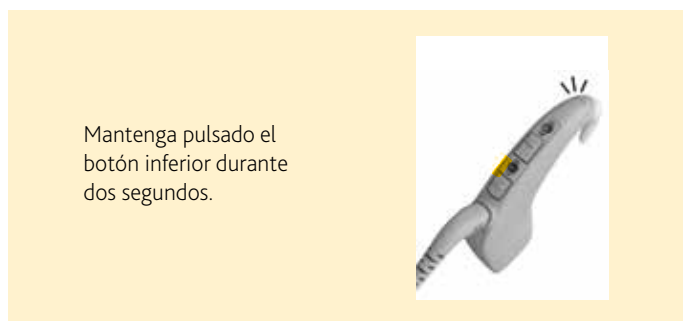


- D** Pulse una vez el botón de enlace del TV Streamer.



- E** El TV Streamer está en modo de enlace.

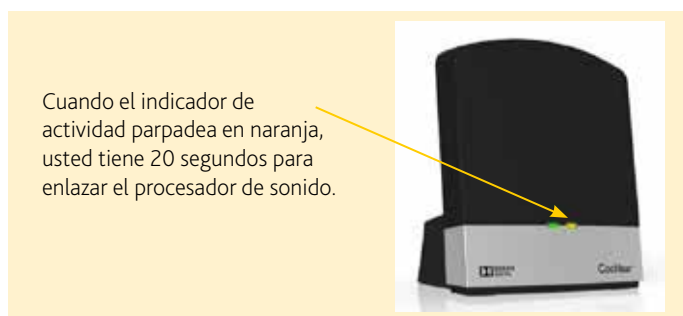

- F** Mientras el modo de enlace está activo, conecte el procesador de sonido.

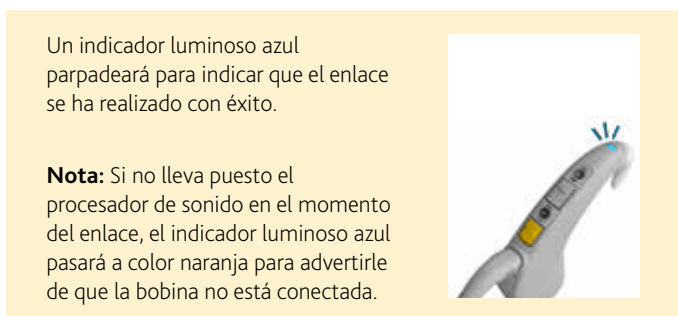

Asistencia

Si desea más información sobre Cochlear Wireless TV Streamer, consulte la guía de usuario incluida con este dispositivo y la guía de usuario de los accesorios inalámbricos.

Si desea más información sobre el procesador de sonido Cochlear de la serie CP900, consulte la guía de usuario correspondiente.

Si desea más información y vídeos informativos, visite el sitio web de Cochlear: www.cochlear.com



Uso de Cochlear Wireless TV Streamer

Comience el streaming con el procesador de sonido

A Encienda el procesador de sonido y el TV Streamer.



Mantenga pulsado el botón superior de su procesador de sonido una vez. En el procesador de sonido parpadea una luz azul que indica que se está produciendo un streaming de audio.

B Para seleccionar otro canal o detener el streaming.



Mantenga pulsado el botón de enlace una segunda vez para seleccionar el canal 2 y otra vez para el canal 3.

Para detener el streaming, pulse brevemente el botón superior.

Comience el streaming con el mando a distancia CR230

Método 1: Encienda el procesador de sonido y el TV Streamer. Encienda el mando a distancia CR230.



Mantenga pulsada la tecla de la telebomba.


Consejo: Mantenga pulsado el botón una segunda vez para seleccionar el canal 2 y otra vez más para el canal 3.

Cuando el dispositivo de audio esté conectado, se iniciará el streaming de audio mediante el TV Streamer.

Para detener el streaming, pulse brevemente la tecla de la telebomba.

O BIEN

Método 2: Encienda el procesador de sonido y el TV Streamer. Encienda el mando a distancia CR230.

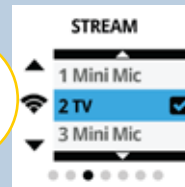

Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla de flecha derecha para ir a la pantalla Stream.

Desplácese por la lista hasta el canal que desee y pulse **OK**.

Cuando el dispositivo de audio esté conectado, se iniciará el streaming de audio mediante el TV Streamer.

Para detener el streaming, seleccione **Desconect.** en la pantalla de selección de Stream.

Comience el streaming con mando a distancia básico CR210

A Encienda el procesador de sonido y el TV Streamer. Encienda el mando a distancia básico CR210.



Mantenga pulsada la tecla de la telebomba.

Cuando el dispositivo de audio esté conectado, se iniciará el streaming de audio mediante el TV Streamer.

B Para seleccionar otro canal o detener el streaming.



Mantenga pulsada la tecla de la telebomba una segunda vez para seleccionar el canal 2 y otra vez para seleccionar el canal 3.

Para detener el streaming, pulse brevemente la tecla de la telebomba.

Cochlear Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus en caracteres chinos, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, el logotipo elíptico y Whisper son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWea, Dermalock, Vistafix y WindShield son marcas comerciales o registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

© Cochlear Limited 2014